



transcom

TRANSCENDENCIAS COMERCIALES S.L.



Parque Empresarial Zuzatzu C/Zubiberri nº31
Edif. Urumea Finca 1 - Planta baja - Local 1
20018 San Sebastián (Guipúzcoa) ESPAÑA
Tel.: +34 943 224 360 Fax: +34 943 224 275
www.transcomsl.com | e-mail: info@transcomsl.com



GRAVITY 10mm INFLOW/HYDROKIT WITH LIMITER

UDI 111787632849

Търговско наименование: Gravity 10mm Inflow/Hydrokit with Limiter

Z-13



СЪДЪРЖАНИЕ

Канюла с ограничител 10 + обтуратор + маркуч за промивка (Water line) 10 (1500 mm / 59") + маркуч за евакуация (Waste Hose) с прозорче (1250 mm / 49")
В нито един компонент не се съдържат фталати.



САМО ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Елементите от този комплект не бива да се използват повторно при никакви обстоятелства, тъй като това може да доведе до болести чрез заразяване на кръвта и венерически болести, както и от такива вследствие на контакт с фекалии.



ВНИМАНИЕ

Риск от перфорация при неспазване на инструкциите.

Да не се използва при деца или бременни жени.

Само за медицински специалисти. Това устройство не е предназначено за употреба от неспециалисти.

Да се използва само с продукти за промиване на дебелото черво TRANSCOM. (Z-01 HC-1 CLASSIC, Z-02 HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000).


Преди да използвате Hydrokit, вижте и противопоказанията и странничните ефекти на активните устройства.

Устройството трябва да се използва в специализирана среда (подходяща за употреба на медицинско оборудване).



ИНСТРУКЦИИ

Свържете маркуча за промивка към канюлата и вкарайте обтуратора в канюлата. Смажете канюлата и внимателно я вкарайте в ректума. След това извадете обтуратора и закачете маркуча за евакуация към канюлата. След всяко лечение изхвърлете целия комплект, като приемете мерки за безопасност за избягване на заразяването.

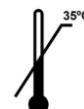

ОТГОВОРНОСТ

Клиентът носи отговорност ако инструкциите и указанията за използване, предоставени от TRANSCOM SL, не бъдат спазени.



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Чрез компонентите си и връзката между активното устройство и пациента комплектът за промивки, Hydrokit, е предназначен да поддържа основната функция на активните устройства, прочистващото действие се извършва единствено чрез последното.



ЦЕЛЕВИ ПАЦИЕНТСКИ ГРУПИ:

Пациенти, които имат нужда от радиологично или ендоскопско изследване.

ЗА ПРИЛАГАНЕ ОТ:

Медицински специалисти.

ОЧАКВАНИ КЛИНИЧНИ ПОЛЗИ:

Чрез връзката между активното устройство и пациента изделието извършва промивка и изчистване на дебелото черво.

Спекулум от биосъвместим материал, който не предизвиква алергии или дразнене.

Трайно качество през целия срок на годност, пътни съединения, херметична опаковка.

Контрол на микробния товар на повърхността на спекулумите за избягване на евентуални инфекции.

Хигиенични процедури за почистване, комплекти за еднократна употреба.

Ергономична форма и възможност за регулиране според анатомията на пациента.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Лесен за боравене, спекулумът е снабден с капаче, а обтураторът е с пръстеновидна форма.

Спекулум

- Изпъкнало-закривен край за лесно въвеждане.
- Ергономичен дизайн за стабилно фиксиране по време на процедурата.
- Пръстеновидна форма за сигурно свързване на тръбата за подаване на вода и отходния маркуч.

Обтуратор

- Обтуратор със закръглен връх за удобно въвеждане.

БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО

След употреба всички компоненти трябва да се обработят при спазване на общоприетите мерки за безопасност, защото ще бъдат замърсени. За изхвърлянето на тези отпадни продукти трябва да бъдат осигурени специални торбички с необходимата здравина, а именно устойчиви на пробиване и скъсване, да бъдат сигурно затворени и третирани като медицински отпадък съвместим с общите битови отпадъци.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:


Кожа с наранявания, нарушена целост или увреждания в досег с устройството.

НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ:

При употребата на това устройство не са установени нежелани реакции.

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, трябва да бъде докладван на производителя и здравните власти.

Виж печата на опаковката

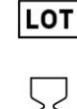

Виж печата на опаковката

РЕЧНИК НА СИМВОЛИТЕ			
LOT			
Партиден код	Да не се използва повторно	Да се пази от слънчева светлина	Срок на годност
Внимание	Производител	Горна граница на температурата	Да не се използва, ако опаковката е повредена и да се направи справка с инструкциите за употреба
UDI	MD		
уникален идентификатор на изделията	Медицинско изделие	Чупливо, работете с необходимото внимание	Да се пази от влага
Дата на производство	Тази страна нагоре	Вижте ръководството/брошурата с инструкции	Номер на модел

Rev. 08:2022-04