



**transcom**

TRANSCENDENCIAS COMERCIALES S.L.

Parque Empresarial Zuatzu C/Zubiberri nº31  
Edif. Urumea Finca 1 - Planta baja - Local 1  
20018 San Sebastián (Gipuzcoa) ESPAÑA  
Tel.: +34 943 224 360 Fax: +34 943 224 275  
www.transcomsl.com | e-mail: info@transcomsl.com



**GRAVITY 10mm INFLOW/HYDROKIT WITH LIMITER**

**UDI 111787632849**

Trádainm: Gravity 10mm Inflow/Hydrokit with Limiter

# Z-13

**NITHE ATÁ ANN**

Spéacalam le srianaire 10 + Obturadóir +Líne uisce 10 ( 1500 mm / 59”) + Píobán Fuill le Fuinneog (1250mm / 49”) Tá na comhpháirteanna go léir saor ó thaláit.

**ÚSÁID AMHÁIN AR A MHÉID**

Ní chóir aon chuid den fhearas seo a athúsáid faoi chúinse ar bith. D’fhéadfadh galair scaipeadh tríd fhuil, trí theagmháil faeacais agus galar venéireach.

**RABHADH**

Baol pollta mura leantar na treoracha.

Ní chóir é a úsáid le páistí nó bean atá ag iompar mórthimpeall.

Ní féidir ach le Gairmithe Cúraim Sláinte í seo a úsáid. Níl an fheiste seo beartaithe d’úsáideoirí tuata.

Tá an trealamh seo eisiach le húsáid le feistí TRANSCOM Colon Cleansing. (Z-01 HC-1 CLASSIC, Z-02 HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000).

Sula n-úsáideann tú an Hydrokit, féach freisin le do thoil do fritáscanna agus fo-iarmhairtí na bhfeistí gníomhacha. D’úsáidí an fheiste i dtimpeallacht oifige gairmiúla (trealamh de chineál oifige leighis).

**TREORACHA**

Ceangal an Píobán Uisce leis an Spéacalam agus Cuir an Obturadóir isteach sa Spéacalam. Cuir bealadh sa Spéacalam agus cuir isteach go cúramach sa reicteam. Ansin bain amach an Obturadóir agus ceangail an Píobán Fuill leis an Spéacalam. Tar éis gach cóir leighis, faigh réidh leis an bhfearas iomlán i mbealach slán chun éilliú a sheachaint.

**FREAGRACHTAÍ**

Mura leantar na treoracha agus na tásca úsáide a chuir TRANSCOM SL ar fáil, beidh an cliant freagrach as.

**AN CHRÍOCH A BEARTAÍODH**

Trína chomhpháirteanna agus tríd an nasc idir an fheiste gníomhach agus an t-othar, tá sé i gceist le Hydrokit tacú le cuspóir beartaithe na bhfeistí gníomhacha, is tríd an dara ceann amháin a dhéantar an gníomh glantacháin.

**SPRIOCGRÚPAÍ OTHAR:**

Othair a dteastaíonn scrúdú raideolaíoch nó scrúdú ionscópach uathu.

**ÚSÁIDEOIRÍ BEARTAITHE:**

Gairmithe Cúraim Sláinte.

**NA TAIRBHÍ CLINICIÚLA ATÁ MEASTA:**

Trí shruthlú dróilainne, éascaítear glanadh na dróilainne tríd an nasc idir an fheiste gníomhach agus an t-othar.

Ní bhíonn ábhar bith-chomhoiriúnach spéacalaim ina chúis le hailléirgí nó le greannú.

Cáilíocht chomhsheasmhach ar feadh a sheilfré, naisc gan sileadh, séala mála aerdhíonaigh.

Ualach miocróbach ar dhromchla na spéacalam rialaithe chun ionfhabhtuithe féideartha a sheachaint.

Nósanna imeachta maidir le glanadh sláinteachais, trealamh aon úsáide.

Cruth eirgeanamaíochta agus saintréithe inoiriúnaithe d’anatamaíocht an daonra

**SAINTRÉITHE FEIDHMÍOCHTA:**

Éasca le láimhseáil, tá flapa ar an spéacalam agus tá an stopthóir deartha i gcruth fáinne.

Spéacalam

- Cruth Cuair Dhronnaigh ag an mbarr le haghaidh ionlocadh éasca
- Dearadh eirgeanamaíochta lena choinneáil ina áit le linn cóireála
- Dearadh fáinne le haghaidh feistiú slán ar líne Uisce agus ar pháibáin Dramháiola.

Stopthóir

- Stopthóir ar a bhfuil gob cruinn le haghaidh ionlocadh compordach

**DIÚSCAIRT SHÁBHÁILTE AN TÁIRGE**

I ndiaidh iad a úsáid, ní mór na comhpháirteanna a láimhseáil de réir réamhchúraimí caighdeánacha uilíocha, toisc go mbeidh siad éillithe. Ní mór málaí sonracha atá sách frithsheasmhach chun an dramháil sin a dhiúscairt a bheith ar fáil, nach mór dóibh a bheith i gcoimeádáin phollta agus a bheith díonta ar bhriseadh agus a dhúnfar agus a bhainisteofar mar dhramháil sláintíochta ar féidir í a chomhtháthú i ndramháil uirbeach.

Ní mór aon teagmhas tromchúiseach a bhaineann leis an táirge a thuairisciú don mhonaróir agus don údarás sláinte.

**FRITÁSÇA:**


Craiceann cneáite, réabtha nó damáistithe i dteagmháil leis an bhfeiste.









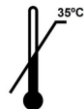







**FO-IARMSAÍ:**

Níor tugadh aon fho-iarsmaí faoi deara le linn úsáid na feiste.

Féach i séalú an mhála

Féach i séalú an mhála



GLUAIS SIOMBAILÍ			
			
Baisc-chód	Ná hathúsáid	Coinnigh amach ó sholas na gréine	Dáta dulta ó mhaith
			
Rabhadh	Déantóir	Uasteorainn teochta	Ná húsáid é má tá an pacáiste damáistithe agus féach ar na treoracha úsáide
			
Sainaitheantóir Feiste Uathúla	Feiste leighis	Sobhriste, bí cúramach leis	Coinnigh tirim
			
Dáta a dhéanta	Coinnigh ina shuí mar seo é	Féach ar an lámhleabhar/leabhrán treoracha	Uimhir mhúnla

Rev. 08:2022-04