



transcom

TRANSCENDENCIAS COMERCIALES S.L.



Parque Empresarial Zuatzu C/Zubiberri nº31
Edif. Urumea Finca 1 - Planta baja - Local 1
20018 San Sebastián (Guipúzcoa) ESPAÑA
Tel.: +34 943 224 360 Fax: +34 943 224 275
www.transcomsl.com | e-mail: info@transcomsl.com



SEGMENTED HOSE/HYDROKIT WITH LIMITER

UDI 111787633415

Handelsbezeichnung: Segmented Hose/Hydrokit with Limiter

Z-16

INHALTE

Kanüle mit Begrenzer 6 + Verschlusskappe + Wasserleitung (1500 mm / 59") + Abwasserschlauch mit Fenster versehen (1250mm / 49")

Alle Bestandteile sind frei von Phthalaten.



NUR EINWEGANWENDUNG

Unter keinen Umständen darf ein Item des Sets erneuert verwendet werden, da dies zu Blut übertragenen oder venerischen Krankheiten oder über den Kontakt mit Fäkalien führen könnte.



VORSICHT

Es besteht das Risiko von Perforationen, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

Nicht für die Anwendung bei Kindern oder schwangeren Frauen vorgesehen.

Nur für den Einsatz durch medizinisches Fachpersonal. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz durch nicht-professionelle Benutzer bestimmt.

Dieses Set ist nur für den Einsatz mit Geräten nur von TRANSCOM Colon Cleansing bestimmt. (Z-01 HC-1 CLASSIC, Z-02 HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000).

Bitte beachten Sie vor der Anwendung des Hydrokits auch die Kontraindikationen und Nebenwirkungen der aktiven Geräte.

Das Gerät ist für den Einsatz in einem professionellen Arbeitsumfeld (medizinische Bürogeräte) vorgesehen.



ANWEISUNGEN

Schließen Sie eine Wasserleitung an die Kanüle an und decken Sie die Kanüle mit der Verschlusskappe ab.


Ölen Sie die Kanüle und führen Sie diese sanft in das Rektum ein. Nehmen Sie dann die Verschlusskappe ab

und schließen Sie den Abflussschlauch an die Kanüle an. Nach jeder Behandlung, entsorgen Sie den gesamten Set auf sichere Weise, um Kontamination zu vermeiden.



VERANTWORTUNG

Der Kunde ist voll verantwortlich, wenn diese Anweisungen und Vorgaben für die Verwendung der Lieferung von TRANSCOM SL nicht befolgt wurden.

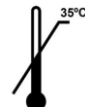

ZWECKBESTIMMUNG:

Dank seiner Komponenten und der Verbindung von aktivem Gerät mit dem Patienten fördert das Hydrokit den Einsatz von aktiven Geräten, die Reinigung erfolgt ausschließlich über die letzteren.



PATIENTEN-ZIELGRUPPEN:

Patienten, die eine radiologische oder endoskopische Untersuchung benötigen.



VORGESEHENE NUTZER:

Medizinische Fachkräfte.

ERWARTETE KLINISCHE VORTEILE:

Durch die Verbindung zwischen dem aktiven Gerät und dem Patienten wird der Dickdarm mit einer Darmspülung gereinigt.

Biokompatibles Spekulummaterial verursacht keine Allergien oder Reizungen.

Gleichbleibende Qualität über die gesamte Lebensdauer, auslaufsichere Verbindungen, luftdichter Beutelverschluss.

Kontrolle der mikrobiellen Belastung auf der Spekulumoberfläche, um mögliche Infektionen zu vermeiden.

Hygienische Reinigungsverfahren, Einweg-Kits.

Ergonomische Form und Anpassungsfähigkeit an die Körperform

LEISTUNGSMERKMALE:

Das Spekulum hat eine Klappe und der Obturator ist ringförmig und leicht zu handhaben.

Spekulum

- Konvex-kurvige Form an der Spitze für einfaches Einführen
- Ergonomisch geformt, um während der Behandlung in Position zu bleiben
- Ringdesign für einen sicheren Verschluss der Wasser- und Abwasserleitung.

Obturator

- Obturator mit runder Spitze für komfortables Einführen

SICHERE PRODUKTENTSORGUNG

Nach dem Einsatz müssen die Komponenten gemäß den allgemein üblichen Vorsichtsmaßnahmen behandelt werden, da sie kontaminiert sind. Für die Entsorgung dieser Abfälle müssen spezielle, ausreichend widerstandsfähige Säcke zur Verfügung stehen, die in durchstich- und bruchsicheren Behältern verschlossen und als den Siedlungsabfällen gleichgestellte Sanitärabfälle entsorgt werden müssen.

KONTRAINDIKATIONEN:

Verwundete, verletzte oder beschädigte Haut in Kontakt mit dem Gerät.

NEBENWIRKUNGEN:

















Beim Einsatz des Geräts wurden keine Nebenwirkungen beobachtet.

Sie müssen jegliche schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der Gesundheitsbehörde melden.

Siehe die Beutelversiegelung



Siehe die Beutelversiegelung

SYMBOL-GLOSSAR			
			
Chargennummer	Nur für den einmaligen Gebrauch	Vor Sonnenlicht schützen	Haltbarkeitsdatum
			
Achtung	Hersteller	Oberer Temperaturgrenzwert	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden und Gebrauchsanweisung beachten
			
Einmalige Produktkennung	Medizinprodukt	Zerbrechlich, mit Vorsicht behandeln	Trocken halten
			
Herstellungsdatum	Hier oben	Handbuch/Broschüre beachten	Modellnummer



Rev.17:2022-04