



transcom

TRANSCENDENCIAS COMERCIALES S.L.

Parque Empresarial Zuatzu C/Zubiberri nº31
Edif. Urumea Finca 1 - Planta baja - Local 1
20018 San Sebastián (Guipúzcoa) ESPAÑA
Tel.: +34 943 224 360 Fax: +34 943 224 275
www.transcomsl.com | e-mail: info@transcomsl.com



SEGMENTED HOSE/HYDROKIT WITH LIMITER

UDI 111787633415

Trádainm: **Segmented Hose/Hydrokit with Limiter**

Z-16

NITHE ATÁ ANN

Spéacalam le srianaire 6 + Obturadóir + Líne uisce (1500 mm / 59") + Piobán fuill le fuinneog (1250mm / 49")
Tá na comhpháirteanna go léir saor ó thaláit.

ÚSÁID AMHÁIN AR A MHÉID

Ní chóir aon chuid den fhearas seo a athúsáid faoi chúinse ar bith. D'fhéadfadh galair scaipeadh tríd fhuil, trí theagmháil faecais agus galar venéireach.

RABHADH

Baol pollta mura leantar na treoracha.

Ní chóir é a úsáid le páistí nó bean atá ag iompar mórthimpeall.

Ní féidir ach le Gairmithe Cúraim Sláinte í seo a úsáid. Níl an fheiste seo beartaithe d'úsáideoirí tuata.

Tá an trealamh seo eisiach le húsáid le feistí TRANSCOM Colon Cleansing. (Z-01 HC-1 CLASSIC, Z-02 HC-2000 CLASSIC, Z-04 HC-1, Z-05 HC-2000).

Sula n-úsáideann tú an Hydrokit, féach freisin le do thoil do fritáscanna agus fo-iarthairtí na bhfeistí gníomhacha. D'úsáidfí an fheiste i dtimpeallacht oifige gairmiúla (trealamh de chineál oifige leighis).

TREORACHA

Ceangal an Piobáin Uisce leis an Spéacalam agus Cuir an Obturadóir isteach sa Spéacalam. Cuir bealadh sa Spéacalam agus cuir isteach go cúramach sa reicteam. Ansin bain amach an Obturadóir agus ceangail an Piobán Fuill leis an Spéacalam. Tar éis gach cóir leighis, faigh réidh leis an bhfearas iomlán i mbealach slán chun éilliú a sheachaint.

FREAGRACHTAÍ

Mura leantar na treoracha agus na tásca úsáide a chuir TRANSCOM SL ar fáil, beidh an cliant freagrach as.

AN CHRÍOCH A BEARTAÍODH

Trína chomhpháirteanna agus tríd an nasc idir an fheiste gníomhach agus an t-othar, tá sé i gceist le Hydrokit tacú le cuspóir beartaithe na bhfeistí gníomhacha, is tríd an dara ceann amháin a dhéantar an gníomh glantacháin.

SPRIOCGHRÚPAÍ OTHAR:

Othair a dteastaíonn scrúdú raideolaíoch nó scrúdú ionscópach uathu.

ÚSÁIDEOIRÍ BEARTAITHE:

Gairmithe Cúraim Sláinte.

NA TAIRBHÍ CLINICIÚLA ATÁ MEASTA:

Trí shruthlú dróilainne, éascaítear glanadh na dróilainne tríd an nasc idir an fheiste gníomhach agus an t-othar.

Ní bhíonn ábhar bith-chomhoiriúnach spéacalaim ina chúis le hailléirgí nó le greannú.

Cáilíocht chomhsheasmhach ar feadh a sheilfré, naisc gan síleadh, séala mála aerdhíonaigh.

Ualach miocróbach ar dhromchla na spéacalam rialaithe chun ionfhabhtuithe féideartha a sheachaint.

Nósanna imeachta maidir le glanadh sláinteachais, trealamh aon úsáide.

Cruith eirgeanamaíochta agus saintréithe inoiriúnaithe d'anatamaíocht an daonra

SAINTRÉITHE FEIDHMÍOCHTA:

Éasca le láimhseáil, tá flapa ar an spéacalam agus tá an stopthóir deartha i gcruith fáinne.

Spéacalam

- Cruith Cuair Dhronnaigh ag an mbarr le haghaidh ionlocadh éasca
- Dearadh eirgeanamaíochta lena choinneáil ina áit le linn cóireála
- Dearadh fáinne le haghaidh feistiú slán ar líne Uisce agus ar phiobáin Dramhaíola.

Stopthóir

- Stopthóir ar a bhfuil gob cruinn le haghaidh ionlocadh compordach

DIÚSCAIRT SHÁBHÁILTE AN TÁIRGE

I ndiaidh iad a úsáid, ní mór na comhpháirteanna a láimhseáil de réir réamhchúraimí caighdeánacha uilíocha, toisc go mbeidh siad éillithe. Ní mór málaí sonracha atá sách frithsheasmhach chun an dramhaíl sin a dhiúscairt a bheith ar fáil, nach mór dóibh a bheith i gcoimeádáin phollta agus a bheith díonta ar bhriseadh agus a dhúnfar agus a bhainistear mar dhramhaíl sláintíochta ar féidir í a chomhtháthú i ndramhaíl uirbeach.

Ní mór aon teagmhas tromchúiseach a bhaineann leis an táirge a thuairisciú don mhonaróir agus don údarás sláinte.

FRICTÁSCA:


Craiceann cneáite, réabtha nó damáistithe i dteagmháil leis an bhfeiste.

FO-IARMSAÍ:

Níor tugadh aon fho-iarsmaí faoi deara le linn úsáid na feiste.





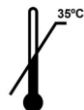











Féach i séalú an mhála

Féach i séalú an mhála



LOT



GLUAIS SIOMBAILÍ			
			
Baisc-chód	Ná hathúsáid	Coinnigh amach ó sholas na gréine	Dáta dulta ó mhaith
			
Rabhadh	Déantóir	Uasteorainn teochta	Ná húsáid é má tá an pacáiste damáistithe agus féach ar na treoracha úsáide
			
Sainaitheantóir Feiste Uathúla	Feiste leighis	Sobhriste, bí cúramach leis	Coinnigh tirim
			
Dáta a dhéanta	Coinnigh ina shuí mar seo é	Féach ar an lámhleabhar/leabhrán treoracha	Uimhir mhúnla

Rev. 08:2022-04